



010011010010

Трехкврупольные системы ГХ-МС Agilent 7010В и 7000D

**РАСШИРЯЙТЕ ЛАБОРАТОРИЮ ВО ВСЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ**



Agilent Technologies

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ УСИЛИЙ, ПРОВЕРЕННАЯ СИСТЕМА

МС-МС — это неоспоримо лучший способ целевого количественного анализа. Теперь вы можете вывести лабораторию на новые уровни эффективности и производительности, получать надежные результаты, а стоимость владения станет меньше. Трехквadrupольные системы ГХ-МС известны своей производительностью и надежностью. Новые приборы Agilent 7000D и 7010B дополнительно имеют режим dMRM, расширяющий возможности анализа и упрощающий работу с приборами.

Расширяйте ВОЗМОЖНОСТИ с легким в использовании и надежным МС-МС

Динамический режим мониторинга множественных реакций (dMRM) — это понятный инструмент, позволяющий задавать параметры МС-анализа для методики ГХ-МС-МС. К тому же режим dMRM упрощает процедуру настройки параметров и позволяет проанализировать большее количество целевых веществ за один цикл, тем самым повышая эффективность использования оборудования.

- Для облегчения управления методиками и повышения производительности можно преобразовать методики на основе временных сегментов в методики dMRM.
- Можно использовать базу данных MRM для пестицидов и экотоксикантов Agilent (G9250AA) или создать свою базу данных.
- Повышайте скорость сканирования за счет комбинирования с режимом MRM для одновременного анализа нецелевых ионов.


Выберите необходимый уровень чувствительности МС-МС

Для получения максимальной производительности компания Agilent предлагает использовать модель 7010B с высокоэффективным источником (HES), позволяющим измерять количества до 0,5 фг для октафторнафталина и менее. А для рутинного анализа используйте модель 7000D с чувствительностью 4,0 фг для октафторнафталина и менее.



Автоматизированный самоочищающийся источник ионизации

Самоочищающийся источник ионизации Agilent JetClean предохраняет трехквadrupольные системы ГХ-МС от остатков матрицы, накапливающихся с течением времени и ухудшающих производительность оборудования. Используя точно контролируемый расход водорода, технология Agilent JetClean значительно сокращает и даже устраняет необходимость очистки источника ионизации, благодаря чему повышается эффективность и снижается себестоимость цикла.

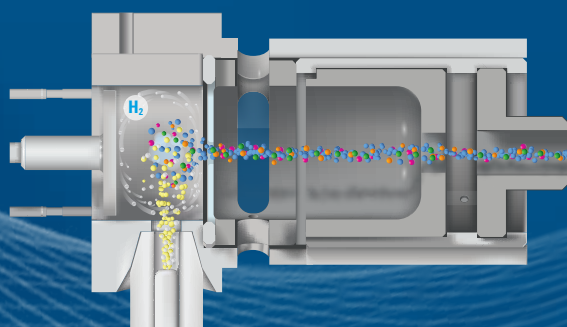


Повышайте ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ, используя мониторинг выбранного иона совместно с методиками сканирования трехквадрупольной системы

Если у вас уже есть одноквадрупольный ГХ-МС, скорее всего это система Agilent 5973, 5975 или 5977 — самая популярная модель ГХ-МС. Теперь вы можете распределять задачи лаборатории по всем доступным приборам, даже по системам 7000 и 7010 (если они не заняты МС-МС).

Загрузите методику и идите по своим делам

Вам не нужно запускать программу переноса методики или выполнять ручную настройку. Просто загрузите методику одноквадрупольной системы и запустите анализ. Такая простота и гармоничность работы доступны только с оборудованием Agilent.

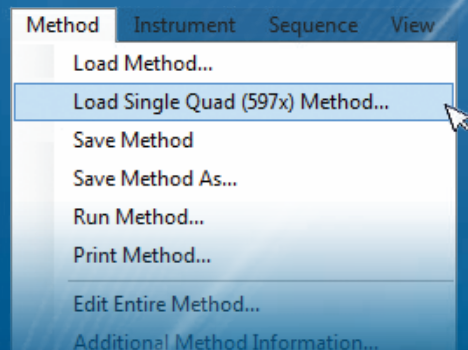

Воспользуйтесь преимуществами лучшего в мире ГХ для систем ГХ-МС


Кроме широкого выбора испарителей, полностью инертных компонентов тракта и колонок Ultra Inert хроматограф имеет автоматическую функцию фиксации времен удерживания, которая позволяет получить максимум от режима dMRM.

Упрощайте весь процесс измерения с помощью инструментов интегрированного программного обеспечения

Программное обеспечение Agilent MassHunter упрощает проведение анализа ГХ-МС и позволяет полностью контролировать работу приборов: от настройки до обработки результатов и составления отчетов. Встроенные калькуляторы и дополнительные средства для ГХ помогают сократить время разработки методик, а Parts Finder позволяет быстро найти необходимые запчасти и их каталожный номер, что упрощает их заказ.

Максимальная эффективность инвестиций в ГХ-МС

Программа Agilent CrossLab позволяет получить комплексное обслуживание приборов и корпоративные услуги, а также полный учебный курс Университета Agilent, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы, упростить администрирование и защитить средства лаборатории, вложенные в покупку приборов.

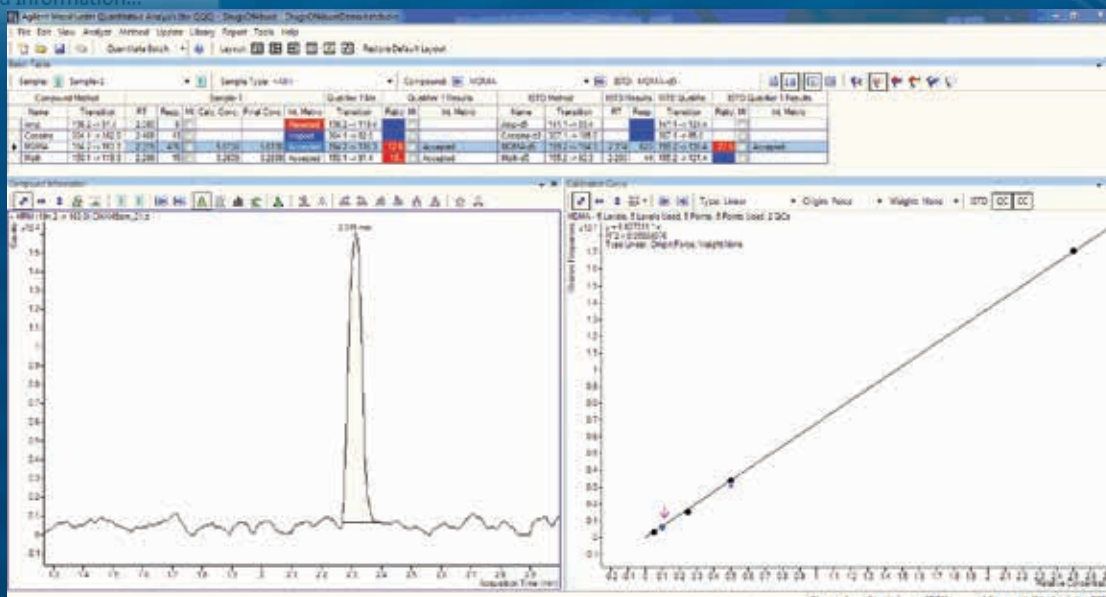

Подробнее:

www.agilent.com/chem/gc-ms-ms

Программа подбора колонки для газовой хроматографии

selectgc.chem.agilent.com

Инертные покрытия в системах

www.agilent.com/en-us/promotions/inertflowpath

Приобретение через Интернет

www.agilent.com/chem/store

Центры по работе с клиентами Agilent

в вашей стране:

www.agilent.com/chem/contactus

Россия

+7 (495) 664-73-00

agilentRU@agilent.com

Европа

info_agilent@agilent.com

Индия

India-Isca_marketing@agilent.com

Азиатско-Тихоокеанский регион

inquiry_Isca@agilent.com

Только для исследовательских целей. Информация, описания и технические характеристики, описанные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Agilent Technologies не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем документе, а также за убытки, связанные или являющиеся следствием получения настоящего документа, ознакомления с ним и его использования.

© Agilent Technologies, Inc., 2016.
Напечатано в США 14 июля 2016 г.
5991-7198RU

